


phyling.fr


EMI

Ergocycle Motorisé Interactif

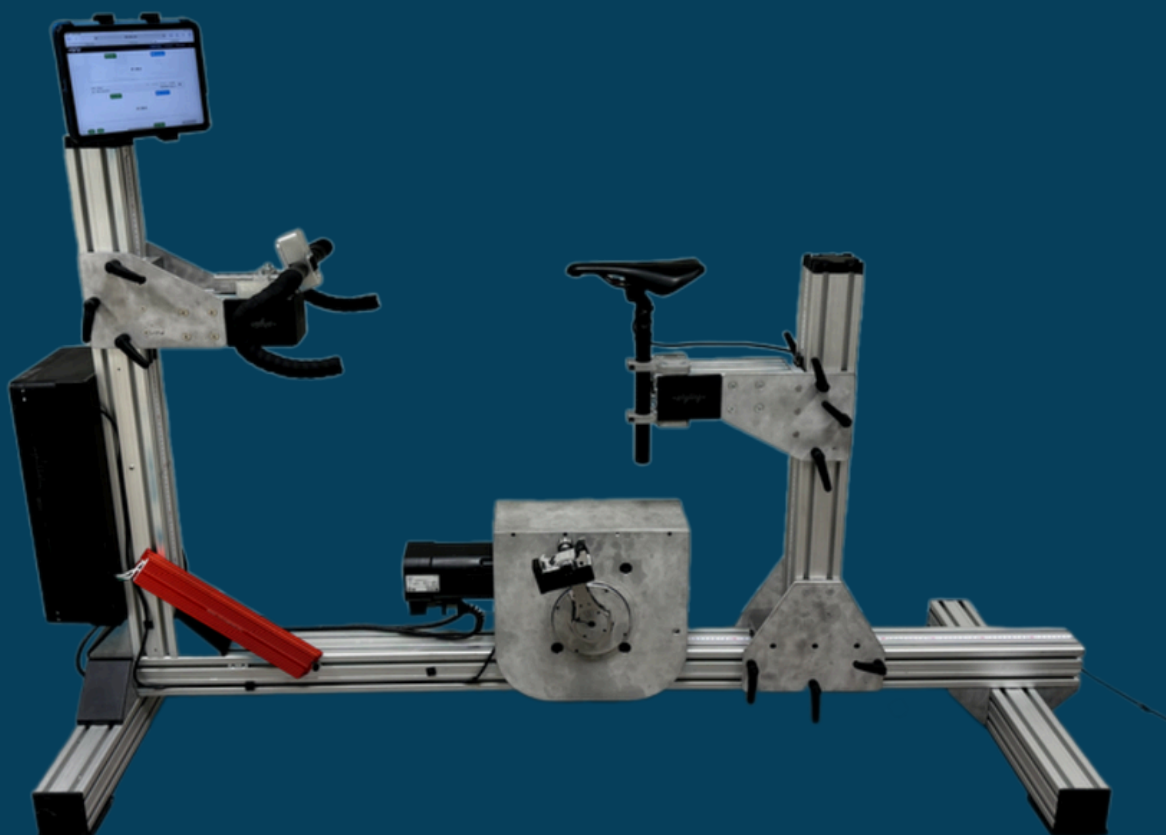

by **phyling**

Phyling est spécialiste de la mesure embarquée et de l'analyse à destination du sport, de la recherche et de l'industrie.

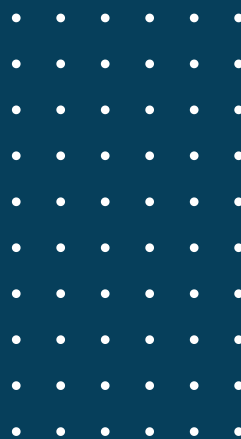

Sommaire

01

Présentation

02

Les caractéristiques techniques

03

Les modes de pédalage

04

Les scénarios

05

L'application
Phyling

06

Les avantages Phyling

07

Ressources



Présentation

EMI répond aux besoins spécifiques de la recherche en permettant la création de nouveaux modes de pédalage grâce à un volant d'inertie virtuel.

Un moteur de 3,5 kW recrée un volant d'inertie et ajuste la résistance en fonction de vos besoins, offrant ainsi des possibilités de réglages illimitées.

L'application Phyling rend l'utilisation simple et rapide depuis tout type d'interface (tablette, PC...).



Caractéristiques

- » Fréquence d'acquisition : jusqu'à 200 Hz
- » 6 modes de pédalage
- » Communication Wi-Fi et BLE. Ports analogiques et I2C
- » Position semi-allongée en option
- » Capteurs de force aux manivelles, top tour et gyroscope
- » Marge d'erreur : 0.1 %
- » Visualisation en temps réel
- » Création de scénarios

Modes de pédalage

Nos modes de pédalage offrent des avantages inégalés, avec des possibilités d'ajustement infini et de contrôle dynamique grâce au volant d'inertie virtuel du moteur. Ce système avancé permet une modulation précise du couple, de la vitesse angulaire et de la puissance, offrant une expérience hautement personnalisable.

Classique

Choisissez l'inertie et la friction pour retrouver les sensations de la route.

Iso-cinétique

Imposez une cadence de pédalage fixe ou limitée.

iso-couple

Une inertie très faible vous permet un travail en force.

rétro pédalage

Réalisez l'ensemble des modes de pédalage en sens inverse de rotation.

iso-puissance

Fixez une puissance de pédalage qui s'ajuste en fonction de la cadence.

isométrie

Bloquez les manivelles pour enregistrer les forces en fonction de l'angle avec une précision de 1°.

Les scénarios

Les scénarios sont des suites de consignes où l'enchaînement de plusieurs types de pédalage est possible. La création est simple et entièrement modulable.

- » Vous pouvez réaliser des enchaînements de modes de pédalage. Mais aussi changer les variables de pédalage au cours du temps et/ou de l'angle de la manivelle.
- » La création de scénarios se fait à partir d'un code informatique simplifié et utilisable par tous.
- » Retrouvez dans vos enregistrements un signal de changement d'étape pour un découpage précis des actions de votre scénario, ainsi que l'ensemble des données brutes et calculées.


Exemples de scénarios

Sprint avec analyse automatique du profil Force-Vitesse.

Simulation d'un plateau ovoïde

Sprint en survitesse

Pédalage en résistance excentrique

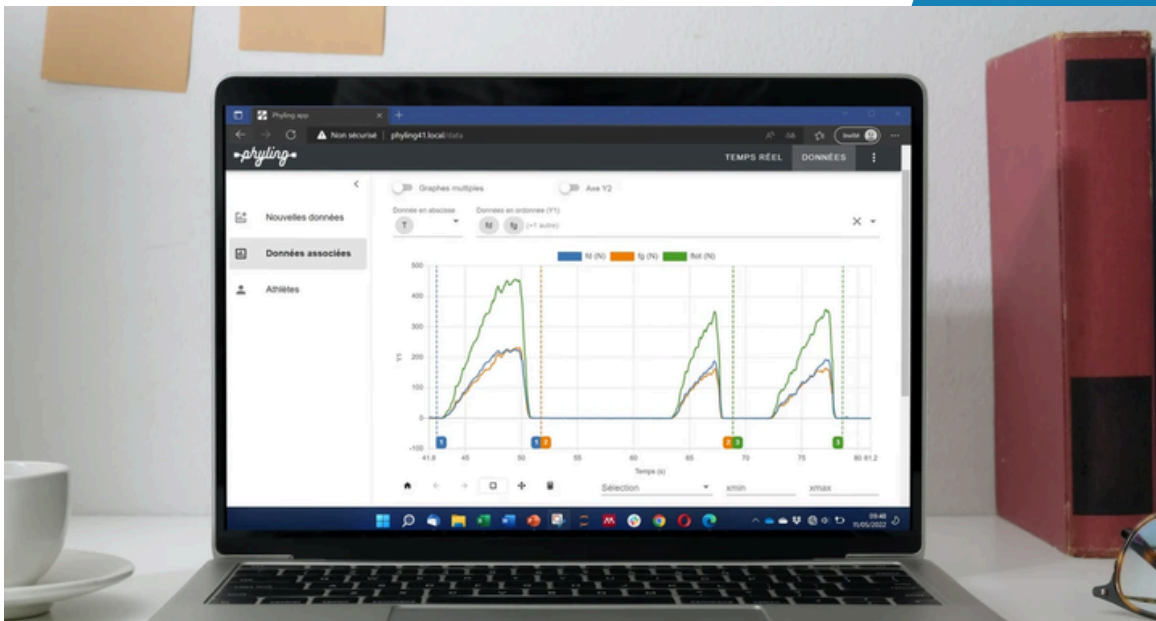

L'application Phyling

L'application Phyling vous accompagne à chaque étapes d'un enregistrement.



Configurez l'ensemble de vos capteurs et des Maxi-Phyling.



Pilotez vos enregistrements et visualisez en direct les données.



Analysez et exportez vos données en .CSV, rapports PDF, vers les plateformes Nolio et SDH.



Accédez à vos données où que vous soyez depuis l'application cloud Phyling et automatisez le transfert de vos données depuis le Maxi-Hub vers le cloud Phyling.

Notre solution

Pourquoi vous pouvez faire confiance à Phyling.

Sur-mesure

Chacun de nos outils est unique et conçu selon vos demandes.

Sans abonnement

L'application Phyling est totalement incluse dans le Maxi-Hub.

Données brutes

Chez Phyling, vous avez toujours la possibilité d'obtenir les données brutes lors de chaque exercice.

Suivi personnalisé

Chez Phyling, nous vous accompagnons du début à la fin de votre projet.

Made in France

Tous nos capteurs sont conçus, usinés et fabriqués en France dans nos ateliers à Palaiseau.

Testé au plus haut niveau

Nos capteurs sont utilisés par les athlètes de plus de 15 fédérations sportives

Ressources

- Validation of dynamic forces measured by an instrumented crankset

Retrouvez ces articles scientifiques et l'ensemble des informations concernant la gamme préparation physique sur notre site internet phyling.fr et dans la rubrique Ressources

phyling.fr



Site internet

 www.phyling.fr

E-mail

 contact@phyling.fr

Linkedin

 [@phyling](https://www.linkedin.com/company/phyling)

Instagram

 [@phyling_](https://www.instagram.com/phyling_)

