


phyling.fr

Le Nano Phyling

by  phyling

Phyling est spécialiste de la mesure embarquée et de l'analyse à destination du sport, de la recherche et de l'industrie.

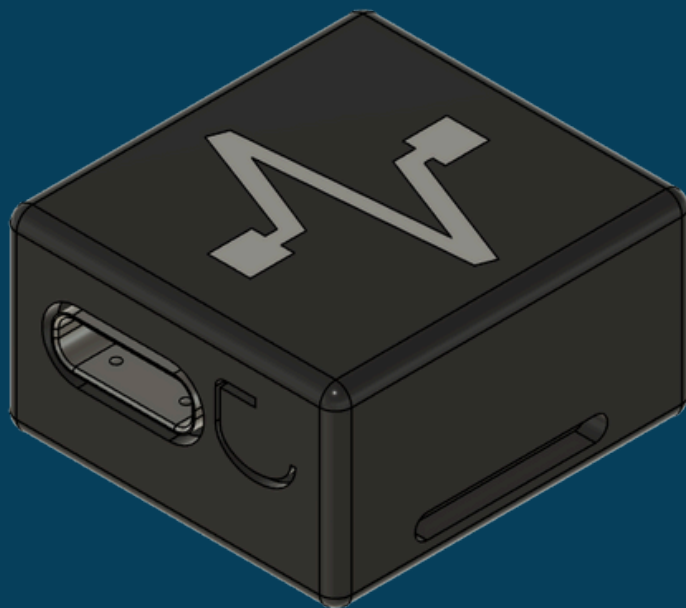

Le **Nano-Phyling** est une centrale inertielle 9 axes ultra-miniature conçue pour démocratiser la mesure du mouvement. Il vient compléter la famille des capteurs Phyling avec une solution compacte, simple et immédiatement exploitable.

Depuis sa création, Phyling développe des solutions dont l'objectif est de faciliter l'accès aux données physiques. Le Nano-Phyling s'inscrit dans cette démarche en offrant un outil précis pour l'analyse du mouvement, aussi bien dans un **cadre pédagogique** que pour des **projets de recherche**, de **prototypage** ou **d'exploration applicative**.


Caractéristiques

- » Capteurs :
 - Accéléromètres 3 axes (16 G)
 - Gyroscopes 3 axes (+/- 2000 deg/s)
 - Magnétomètres 3 axes (+/-16 Gauss)
- » Dimensions: 22 mm x 22 mm x 12 mm
- » Masse : 6 g
- » Température d'utilisation: de 0° à 40 °C
- » Transfert des données : Bluetooth Low Energy (BLE)
- » Fréquence d'acquisition : 200 Hz
- » Autonomie : 4h

Collecter des données

Le Nano-Phyling s'intègre directement dans la **chaîne d'acquisition Phyling** (Maxi-Phyling) mais a aussi été conçu pour être utilisé depuis **n'importe quel ordinateur** grâce à une librairie python libre d'accès.

- » Une bibliothèque Python permet de récupérer les données en seulement quelques lignes de code :
pip install phyling
- » Un appui long sur le bouton d'allumage permet d'allumer le Nano
- » La commande ***nano.run()*** permet de lancer un enregistrement
- » Le notebook d'exemple et la documentation est disponible via :
<https://github.com/phyling-sport/phyling/blob/main/examples/Nano-Phyling/nanophyling.ipynb>

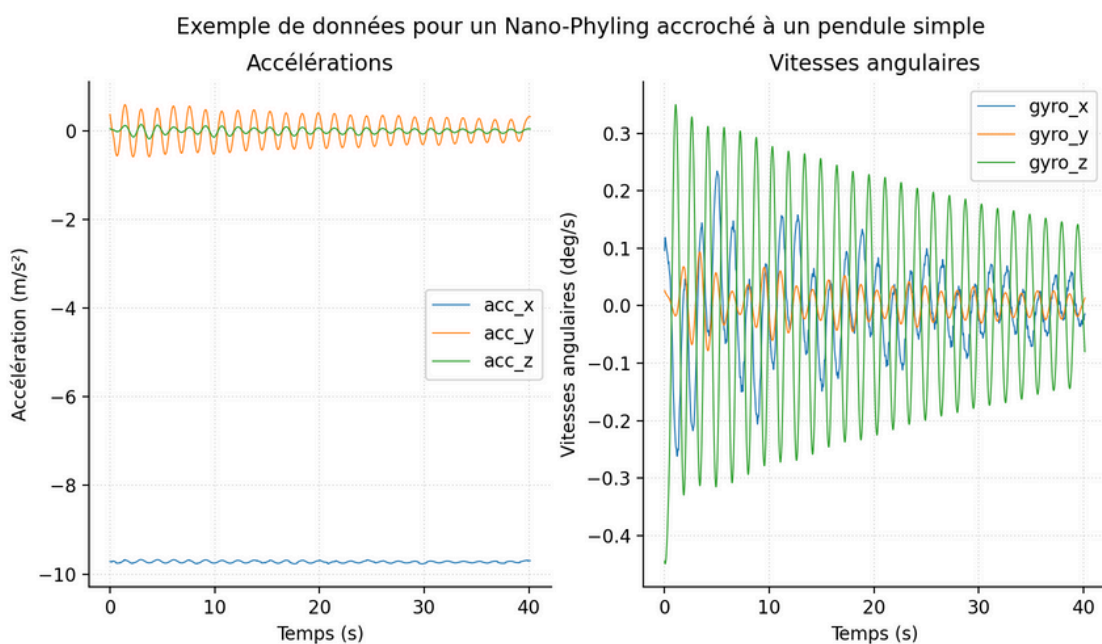

phyling.fr

Plus d'informations :
[Notice d'utilisation](#)



Site internet

 www.phyling.fr

E-mail

 contact@phyling.fr

Linkedin

 [@phyling](#)

Instagram

 [@phyling_](#)

